


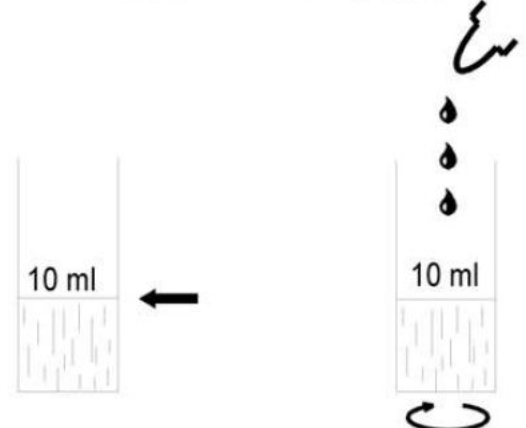
Nr kat. 400015 cały zestaw


## Najprostszy zestaw do analizy twardości węglanowej wody

### 1 kropla = 1°n

1. Napełnij probówkę badaną wodą do znaku 10 ml.
2. Dodawaj indykator po 1 kropli mieszając aż do przełamania barwy z różowej na zieloną.
3. Ilość dodanych kropli oznacza twardość węglanową wody w stopniach niemieckich.

1  = 1°KH



 blau → rot blue → red bleu → rouge	Carbonathärte in °dH	Säurekapazität K <sub>6.3</sub> in mmol/l
1	1	0,36
2	2	0,72
3	3	1,08
4	4	1,44
5	5	1,80
6	6	2,16
7	7	2,52
8	8	2,88
9	9	3,24
10	10	3,60
20	20	7,20

Produkt został uznany wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych za nie wymagający oznaczenia.